
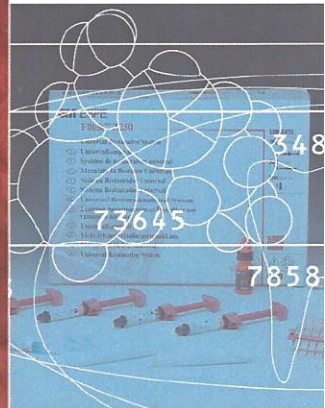


# Filtek Z250

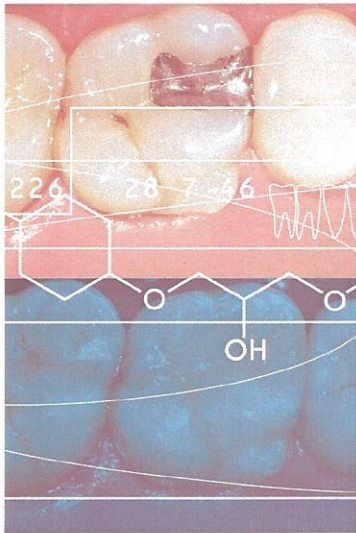

## Mesteri esztétika rétegzés nélkül


- A Filtek Z250 tömőanyag 2004-ben +++++ értékelést kapott, az 5 évvel azelőtt elkészített restaurációk klinikai vizsgálatai alapján (21. évad 4. szám, 2004. május)
- Mesteri esztétika rétegzés nélkül
- Kaméleon effektus
- Kiváló kopásállóság extrém helyzetekben a cirkóniumnak köszönhetően
- Univerzális felhasználás anterior és poszterior területen is
- Filtek Z250 univerzális kompozit a 3M ESPE-től anterior és poszterior régióba

### A klasszikus mikrohibrid kompozit


A Filtek Z250 fényrekrétő radiopak, univerzális kompozit tömőanyag, mely direkt anterior, poszterior restaurációkhoz, csomkfelépítéshez, indirekt restaurációkhoz, héjakhoz, inlay-k, onlay-k készítésére egyaránt alkalmas.

A Filtek Z250, az univerzális kompozit a 3M ESPE megbízható hibrid technológiájával klinikailag már több milliószor bizonyított. Kiválóan használható a megfelelő egyszínes és rétegzéses technikára is, anterior és poszterior régióban egyaránt.

A nagyobb molekulásúlyú és kevesebb kettős kötést tartalmazó komponenseknek (UDMA és Bis-EMA) köszönhetően a polimerizációs zsugorodás mértéke kisebb (kb. 2.3%), így csökken a széli résképződés, ezáltal a nemkívánatos secunder caries és széli elszíneződés kialakulása. Több klinikai vizsgálat is bizonyítja, hogy a kezelhetőség, tömöríthetőség és a polimerizációs zsugorodás tekintetében előkelő helyet foglal el az esztétikus tömőanyagok között (1., 2.kép).\*

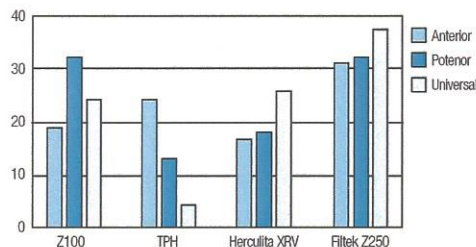

1. kép: Kezelhetőség

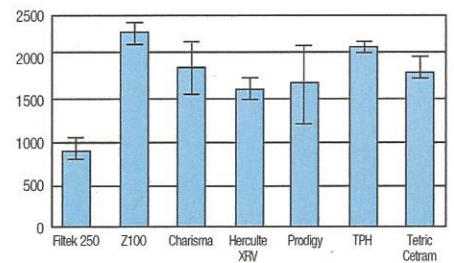

2. kép: Polimerizációs zsugorodás

Az esztétikai megjelenést nagymértékben befolyásolja a kompozit polírozhatósága, illetve a polírozottság hosszú ideig való megőrzése. A Filtek Z250-nél, erről, a töltőanyag szemcsemérete és méretmegoszlása gondoskodik. Ugyancsak a kedvező esztétikát szolgálja a 15 színárnyalat, mellyel frontfogakat és molárisokat egyaránt művészi módon építhetünk fel.\*

Remek felhasználhatósága nem csupán a direkt, tömésekre vonatkozik, hanem az indirekt restaurációkra is, mint az inlay, az onlay, a héjak, de használhatjuk csücsök-, illetve csonkfelépítésre és akár sínezésre is.\*

## A Filtek Z250 időt spórol Önnek, mivel 50%-kal kevesebb megvilágítási időt igényel a leggyakrabban használt színekhez

Rétegezve applikálni a táblázatban jelölteknek megfelelően:

Szín	Rétegvastagság	Megvilágítási idő
A1, A2, A3	2, 5 mm	20 sec.
A3,5, A4, B1	2, 5 mm	20 sec.
B2, B3, C2	2, 5 mm	20 sec.
C3, D3, I	2, 5 mm	20 sec.
B0,5, C4, UD	2, 5 mm	20 sec.

### Miért jó az UD (universal dentin) szín?


Kiterjedtebb front tömések esetén a palatinális oldalon alkalmazva kiválóan alkalmas a szájüregi sötétség elfedésére, ezáltal blokkolja a szürke szín áttűnését. Moláris régióban a mélyebb kavitások sötétebb árnyalata, esetleges amalgám tetováció maszkolására használható.



### Rendelési információ

#### Termékkód # Termék megnevezés

**6020E Filtek Z250 Induló Készlet**  
 8x4 g tubusos Filtek Z250 kompozit (A1, A2, A3, A3,5, B3, C2, D3, UD színekben)  
 1x6 ml fiola Adper Single Bond 2  
 1x3 ml Scotchbond savazógél  
 kiegészítők, színkulcs

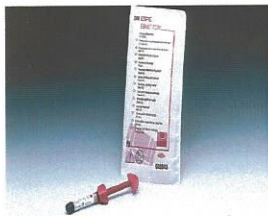

**6020 Filtek Z250 Utántöltő**  
 4 g tubusos tömőanyag  
 (A1, A2, A3, A3,5, A4, B0, 5, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D3, I, UD színekben)



**6021 Filtek Z250 Utántöltő**  
 20x0,2 g kapszulás tömőanyag (A1, A2, A3, A3,5, C2, D3, UD színekben)

**3M ESPE**

3M Hungária Kft.  
 1138 Budapest, Váci út 140.  
 Tel: 06-1-270-7777  
[www.3mespe.com/hu](http://www.3mespe.com/hu)  
[www.3m.hu](http://www.3m.hu)

Superbránds<sup>2008</sup>

A 3M, a 3M ESPE és a Filtek márkanévek a 3M és a 3M ESPE AG. tulajdonát képezik. A Tetric, a Herculite, a TPH, a Prodigy és a Charisma márkanévek sem a 3M sem a 3M ESPE AG. tulajdonában nem állnak.