


**3M** ESPE

# Sof-Lex™

A Sof-Lex™ finírozó és polírozó rendszer

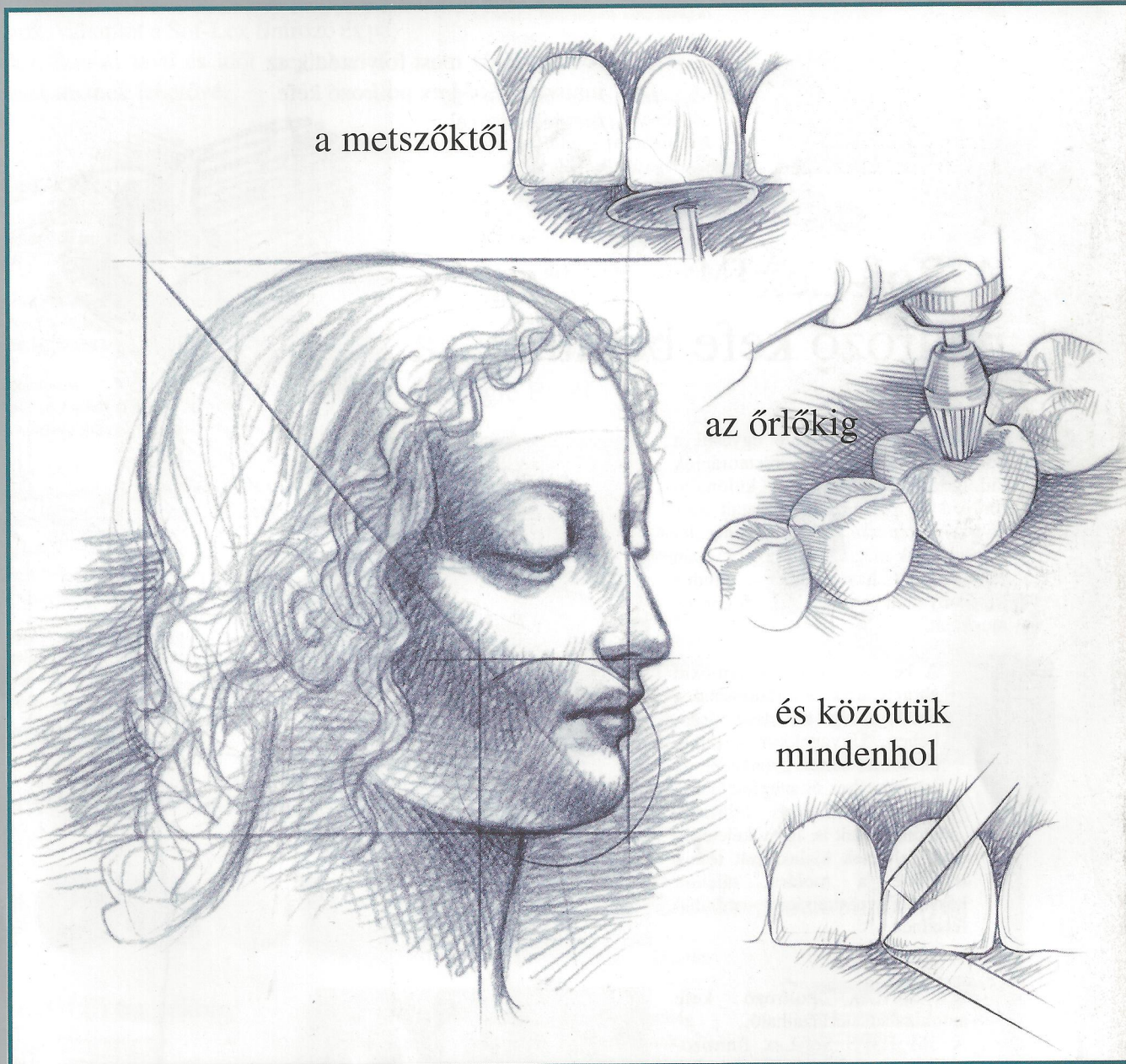

a metszőktől

az órlőkig

és közöttük  
mindenhol





A 3M ESPE a fogászati innovációk elismert vezetője. Az 1970-es évek közepén bevezetett Sof-Lex™ finírozó-polírozó rendszer forradalmi áttörést jelentett - a legmodernebb megoldást kínálva a fogorvosoknak a restauráció tökéletes kidolgozására.

A korongok, csíkok és az egyszerűen használható mandrelek színekódolt, folyamatos rendszerével a Sof-Lex család továbbra is páratlan eredményeket biztosít.

A reneszánsz most folytatódik az innovatív Sof-Lex polírozó kefe megjelenésével...





## A Sof-Lex™ polírozó kefe bemutatása

A Sof-Lex polírozó kefe egyesíti a posterior kompozit restaurációk kidolgozásának egykor különálló finírozó és polírozó folyamatait *egy, egyszerű lépéssé*. Időt és energiát takaríthatunk meg azáltal, hogy csupán egy eszközt használunk - mindez hatékonyabbá teszi a fogorvos munkáját.



A kefe sörtéi alumínium-oxid abrazív anyagot tartalmaznak a hatékonyság növelése érdekében. Ugyanakkor a puha, elastomer sörték gyengédek az ínszövethez és megfelelnek a konvex és konkáv felületek anatómiájának is, így tökéletesen sima felületek kialakítását teszik lehetővé a moláris tájékon készített restauráció minden felszínén.

A Sof-Lex polírozó kefe autoklávban sterilizálható. A 3M ESPE Sof-Lex finírozó-polírozó rendszer részeként a polírozó kefékkel az Ön igényének megfelelő legkiválóbb eredményeket érheti el - kevesebb idő alatt és kevesebb energiával, mint azt képzelné.

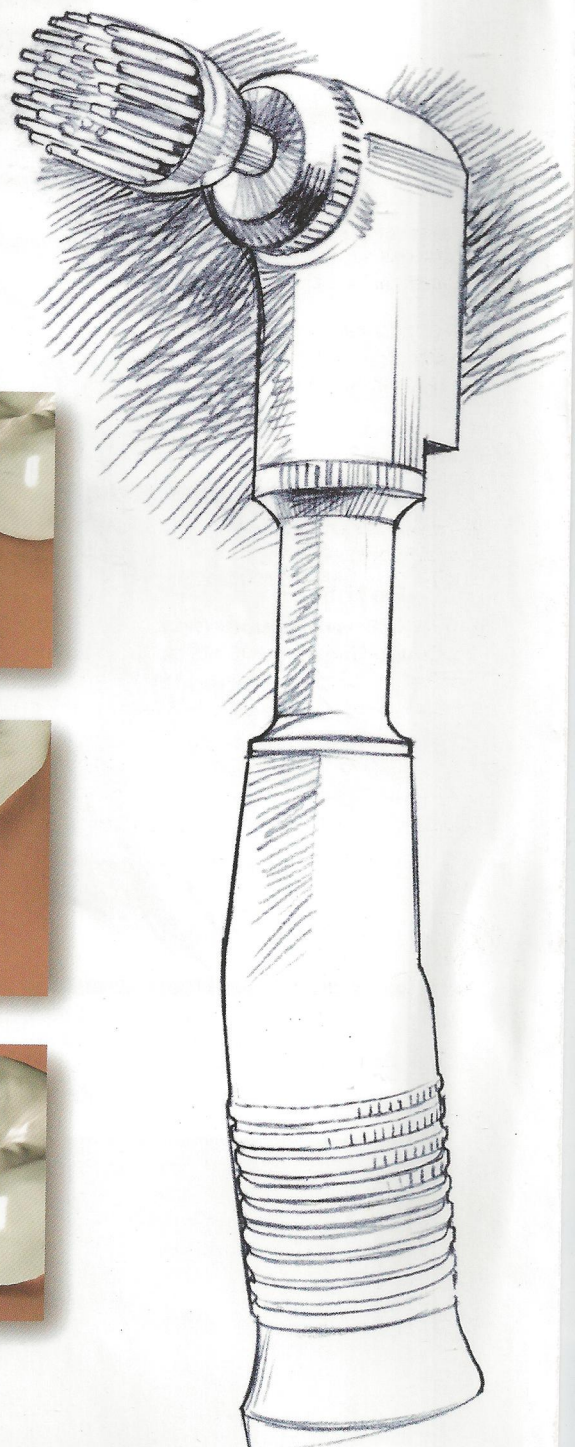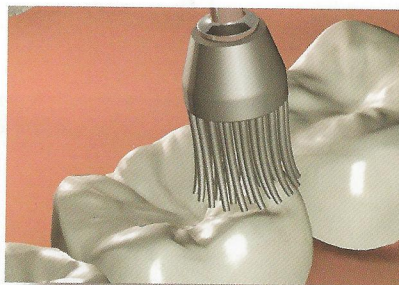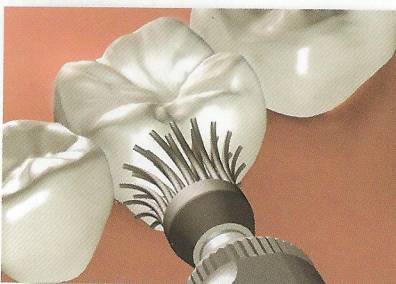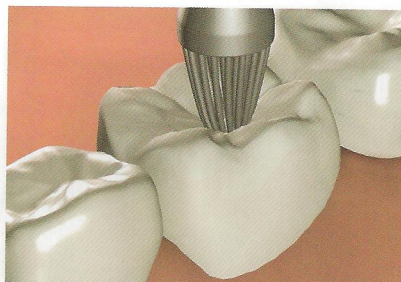




# Sof-Lex™ finírozó és polírozó korongok és csíkok



## Precízen, gyorsan - kompromisszumok nélkül.

A különböző szemcseméreték, a folyamat megkönnyítéséért kialakított egyértelmű színkódolás, a gyorsan és könnyen fel- és lepattintható, cserélhető korongok, valamint a Sof-Lex finírozó és polírozó csíkok kivételes, hosszú távú és időt megtakarító finírozást és polírozást tesznek lehetővé.

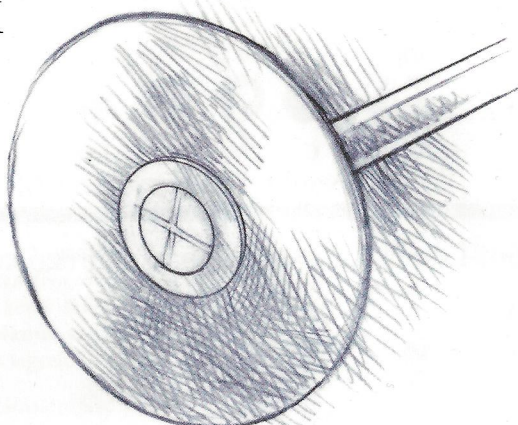


### Sof-Lex korongok


- - megfordítható korongok megkönnyítik a különböző felszínek elérését
- - gyorsan és könnyen cserélhetőek egyszerűen és biztonságosan fel- és lepattinthatók a mandrelről
- - színkódoltak sorrendben a sötét színtől (durva) a világos színig (szuperfínom)
- - két méretben a széleskörű igények kielégítése érdekében 13 mm (1/2 inch) vagy 9 mm (3/8 inch)
- - maximális csiszoló felszín az alacsony profilú mandrel és a korong kis nyílása nagy működő felszínt biztosít
- - választék korongvastagságból és rugalmasságból széleskörűen használhatóak a normál és extra vékony változatnak köszönhetően.

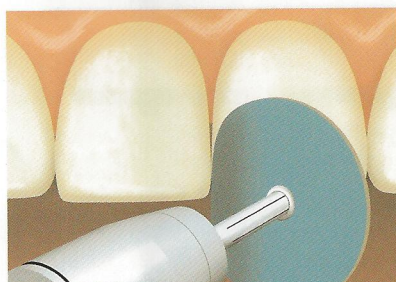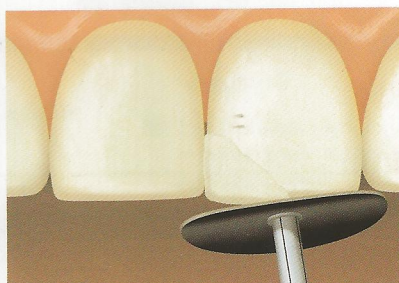

### Sof-Lex™ polírozó korongok

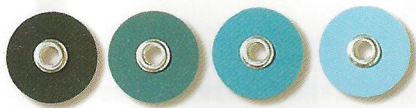

### Sof-Lex™ Extra vékony polírozó korongok

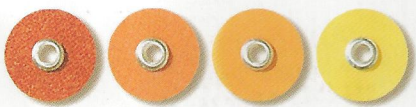


### Sof-Lex csíkok

Interproximális felszínek finírozásához és polírozásához



- - egyszerű alkalmazás a csík közepén nincs polírozó szemcse az interproximális térbe való könnyű bejutás érdekében
- - csíkként 2 különböző szemcsézettség minden polírozócsík két funkciót lát el az időmegtakarítás érdekében
- - színkódolt a sötétől a világos színig, a lépések könnyű követhetőségéért
- széles választék szemcsézettségből és szélességből 4 féle szemcseméret és két különböző szélesség
- - szakadásálló a poliészter fedőréteg megakadályozza a szakadást, ugyanakkor biztosítja a csík rugalmasságát, valamint gyengédségét az ínszövethez.

### Sof-Lex™ finírozó és polírozó csíkok


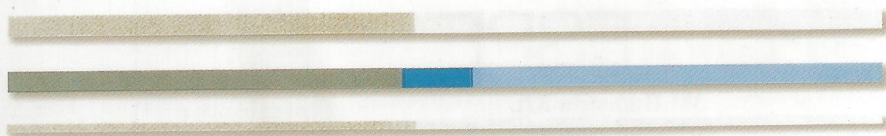





## Sof-Lex™ polírozó korongok

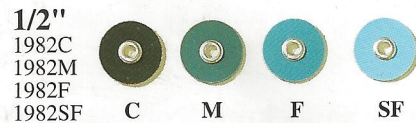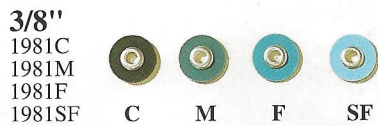

## Sof-Lex™ XT extra vékony polírozó korongok

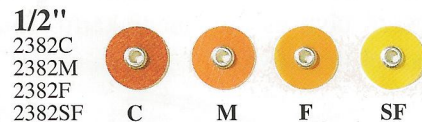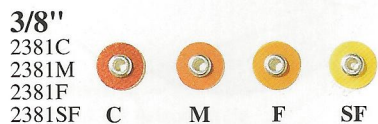

## Sof-Lex™ finírozó és polírozó csíkok

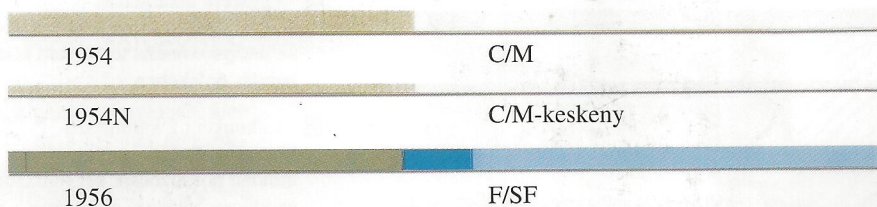

## Sof-Lex™ polírozó kefe


### #1750 Bevezető készlet

- 12 db Sof-Lex polírozó kefe
- 2 db Sof-Lex mandrel keféhez - RA
- Színenként 30 db Sof-Lex XT finírozó-polírozó korong 1/2" vegyesen durva, közepes, finom, szuperfinom
- 1 db Sof-Lex mandrel koronghoz - RA



### #1751 Kefe utántöltő

- 24 db Sof-Lex polírozó kefe

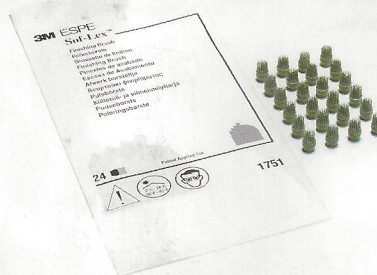

### #1755 RA mandrel utántöltő könyökdarabba

### #1756 FG befogású mandrel utántöltő

- 3 db Sof-Lex mandrel keféhez

**3M ESPE honlap: [www.3mespe.com](http://www.3mespe.com)**  
**3M ESPE forródrót: 06-30/9349-255**

©3M 2002. A 3M, ESPE és a Sof-Lex a 3M és a 3M ESPE AG védjegyei.

Az Ön **3M** ESPE forgalmazója:

**3M ESPE**

**3M Hungária Kft.**  
**Dental csoport**

1138 Budapest, Váci út 178.  
Tel: 1- 270-7777, Fax:1- 320-0951

**DÓM-DENT KFT.**  
6725 Szeged, Felhő u. 9.  
Tel./Fax: (62) 426-438; 424-0